



BEAUTY BRIDGE+

Manuale d'uso



Indice

1	ISTRUZIONI	3
2	AVVERTENZE GENERALI	3
3	SIMBOLI	3
4	PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO	9
5	CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO	9
6	ATTREZZATURA	9
7	ISTRUZIONI PER L'USO	11
8	PRECAUZIONI PER L'USO	11
9	CONTROINDICAZIONI	12
10	ASSISTENZA E GARANZIA	12
11	SPECIFICHE TECNICHE	12
12	DESCRIZIONE DEI PULSANTI DEL CONTROLLER	12
13	CONSENSO INFORMATO - Trattamento estetico "BEAUTY BRIDGE+"	15
13.1	DATI CLIENTE	15
13.2	DATI OPERATORE / CENTRO	15
13.3	DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO	15
13.4	POSSIBILI EFFETTI	15
13.5	CONTROINDICAZIONI	15
13.6	DICHIARAZIONI DEL CLIENTE	15
13.7	PRIVACY	15
14	INFORMATIVA PRIVACY	16

1 ISTRUZIONI

- Schiarimento della pelle
- Azione rigenerativa
- Rimozione delle lenti, macchie e rughe.
- Tonificazione della pelle
- Trattamento dell'acne e sollievo dal dolore.
- Regolazione della produzione di sebo

2 AVVERTENZE GENERALI

Grazie per aver scelto il nostro dispositivo di fotobiostimolazione a LED. Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e seguire le avvertenze per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Conservare questo manuale per eventuali riferimenti futuri.

3 SIMBOLI

Simboli di indicazioni di pericolo, avvertenze e precauzioni generali che possono apparire su tutte le tipologie di apparecchiature esse sono di puro carattere informativo.

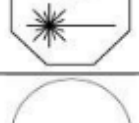
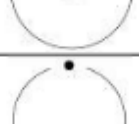
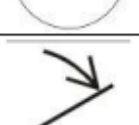
A titolo informativo in questo manuale sono presenti le indicazioni (simboli e/o segni) che evidenziano il grado di pericolo o avvertenze, che sono apportate sulle nostre apparecchiature e sull'etichetta matricola. **Sostituire con nuove etichette quando sono macchiate, poco leggibili o rimosse.**

Contattate il nostro ufficio vendite quando sono necessarie nuove etichette, che vi verranno inviate.

Simboli, segni e / o avvertenze che richiamano l'attenzione degli utenti. Alcuni dei simboli possono apparire sull'apparecchiatura anche se non direttamente attinenti.

	Indica il pericolo per i pazienti, clienti, operatori o il personale
	Indica un potenziale pericolo per i pazienti, clienti, operatori o il personale.
	Poca cautela può causare lesioni alle persone o danni all'apparecchiatura
	Attenzione Emissione laser classe 4
	Evitare esposizione diretta degli occhi alle Emissioni laser
	Attenzione: uso di acqua deionizzata classe D
	Attenzione: per mantenere la garanzia

	Attenzione leggere attentamente il manuale prima dell'utilizzo
	Indicazione di sostituzione filtri
	Attenzione Emittitore
	È obbligatorio proteggere gli occhi con gli appositi occhiali.
	Leggere attentamente il manuale d'uso
	Mantenere lubrificati gli Oring
	Controllo qualità apparecchiatura
	Utilizzare SOLO acqua deionizzata classe D ad uso elettronico
	Assicurati di seguire le istruzioni quando si utilizza la macchina
	Apparecchiatura sotto tensione; utilizzare cautela ed assicurarsi di aver preso tutte le precauzioni del caso, se si utilizza le apparecchiature in luoghi o in modi scorretti si possono prendere scosse elettriche
	Controllo corrente *

	Indica la possibilità di esposizione a radiazioni laser pericolose che possono provocare lesioni all'operatore, paziente, cliente o personale.
	Non utilizzare prodotti infiammabili nei pressi dell'apparecchiatura
	Questo simbolo indica esposizione ad onde elettromagnetiche
	Questo simbolo indica un'attenzione
	Simbolo di messa a Terra
	Indossare occhiali di protezione
	Togliere la spina dalla presa di corrente
	Leggere attentamente il manuale d' istruzioni
	Emergenza, simbolo di Stop Apparecchiatura
	Simbolo interruttore a chiave ON
	Simbolo interruttore a chiave OFF
	Simbolo Pedale di azionamento

	Simbolo di blocco a distanza
	Marchio che certifica la conformità dell'apparecchio agli obblighi legislativi delle direttive comunitarie europee ad essa applicabili
	Il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto urbano ma deve essere oggetto di una raccolta separata AE
	Il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto urbano ma deve essere oggetto di una raccolta separata Pile e Accumulatori
	Non pulire mai l'apparecchiatura né le sue parti con acqua corrente.
	Apparato con parte elettrica applicata di tipo B conforme a IEC EN 60601-1 (1991)
	Questo simbolo indica divieto.
	Spegnere il cellulare durante il trattamento
	Isolamento Elettrico
	Produttore
	7 Data fabbricazione

	La confezione deve essere gettata nell'indifferenziata.
	Conformità alle regole della raccolta differenziata
	Apparato produttore di OZONO
	Pericolo per persone, animali, ambiente
	Produce gas Tossico
	Dannoso a lungo termine
	Pericolo infiammabile

4 PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

La World Medical Association (WMA) riconosce l'efficacia di specifiche onde luminose nell'attivazione dei processi di rigenerazione cellulare e tissutale.

Il dispositivo utilizza la fotobiostimolazione e la nanotecnologia per generare calore controllato e trasferire energia a bassa intensità e ad alta purezza. Questo favorisce la stimolazione dell'attività cellulare, con effetti naturali, sicuri e senza effetti collaterali, rendendolo adatto a tutti i tipi di pelle.

La radiazione luminosa viene assorbita dagli strati più profondi della pelle, dove l'energia viene convertita in energia intracellulare. Questo processo rilassa e rafforza i capillari, stimola le reazioni enzimatiche fotochimiche e aumenta l'attività della catalasi e della superossido dismutasi (SOD), che promuovono la degradazione dell'ATP, la principale fonte di energia cellulare.

Il risultato è un aumento del metabolismo e della sintesi cellulare, una maggiore produzione di collagene, una riorganizzazione delle fibre elastiche e del collagene e l'eliminazione della melanogenesi. Viene inoltre favorita la microcircolazione e stimolata la rigenerazione del tessuto connettivo.

5 CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO

Il dispositivo portatile accelera la microcircolazione, migliora l'elasticità della pelle, combatte l'opacità e la illumina.

Integra 3 sorgenti LED con luce NIR con diverse onde luminose (blu, gialla, rossa) e una modalità FIR (infrarossi) specifica per vari problemi della pelle.

Luce blu + NIR(415 nm): Azione antibatterica e antinfiammatoria, utile contro acne, infiammazioni e lesioni cutanee. Favorisce una guarigione ottimale e una migliore rigenerazione.

Luce gialla + NIR(590 nm): stimola il metabolismo cellulare, favorisce il drenaggio linfatico, riduce la pigmentazione e il rossore, tratta il rossore e migliora l'immunità della pelle.

Luce rossa + NIR(630 nm): Riattiva l'attività cellulare, accelera la sintesi del collagene, ha un effetto anti-invecchiamento, schiarente, tonificante e antiossidante.

Luce infrarossa (FIR)(850 nm): Migliora la circolazione sanguigna e l'ossigenazione dei tessuti, favorisce la riparazione dei tessuti, riduce il dolore muscolare e articolare.

6 ATTREZZATURA

- 1× dispositivo principale in silicone PDT
- 1× Telecomando
- 1× cavo di ricarica USB
- 1 adattatore 12 V/4 A
- 1× Poggiatesta
- 1× Cinghia di fissaggio
- 1× Occhiali protettivi
- 2× Staffe di supporto
- 1× Manuale utente





7 ISTRUZIONI PER L'USO

Pulire accuratamente la pelle e asciugarla con un panno morbido.
Collegare il dispositivo al controller tramite il cavo USB.

Accedere al dispositivo prima di premere il pulsante di accensione.
Selezionare la modalità luminosa con il colore del gusto, l'intensità (50,75,100%) e impostare il tempo di elaborazione desiderato (si consigliano 15-30 minuti). Non guardare direttamente la fonte di luce.

Posizionare il cinturino attraverso i fori corrispondenti alle estremità del dispositivo. Modellare il dispositivo in un Utilizzare l'arco per adattarlo al viso o applicarlo al corpo o alle gambe. Si consiglia di utilizzarlo in posizione supina, per favorire il rilassamento.

Dopo aver completato il trattamento, attivare il dispositivo e pulirlo accuratamente.

8 PRECAUZIONI PER L'USO

Non guardare direttamente la fonte di luce. Tenere gli occhi chiusi durante l'uso e proteggerli con occhiali di sicurezza adeguati.

Evitare di forare o danneggiare la superficie del LED.

Non immergere il dispositivo in acqua. Pulirlo con un panno umido.

Non utilizzare solventi chimici aggressivi.

Evitare l'esposizione diretta alla luce solare.
Pulire accuratamente il dispositivo dopo l'uso.

9 CONTROINDICAZIONI

Non usare in caso di gravidanza, epilessia, malattie della tiroide, allergie fotosensibili o terapie farmacologiche fotosensibilizzanti, lesioni cutanee o traumi.

Non usare sui bambini.

In caso di eventi avversi o incidenti, interrompere l'uso e consultare un medico.

10 ASSISTENZA E GARANZIA

Garanzia di 12 mesi dalla data di acquisto (non copre i danni dovuti a usura o uso improprio).

Conservare la ricevuta e il sigillo del rivenditore per eventuali interventi in garanzia.

L'adattatore e il cavo dati non sono coperti dalla garanzia per la normale usura.

La garanzia è valida per dieci anni in caso di manomissione o riparazioni non autorizzate.

Le spese di spedizione sono a carico dell'utente.

Per assistenza, contattare il distributore o il produttore.

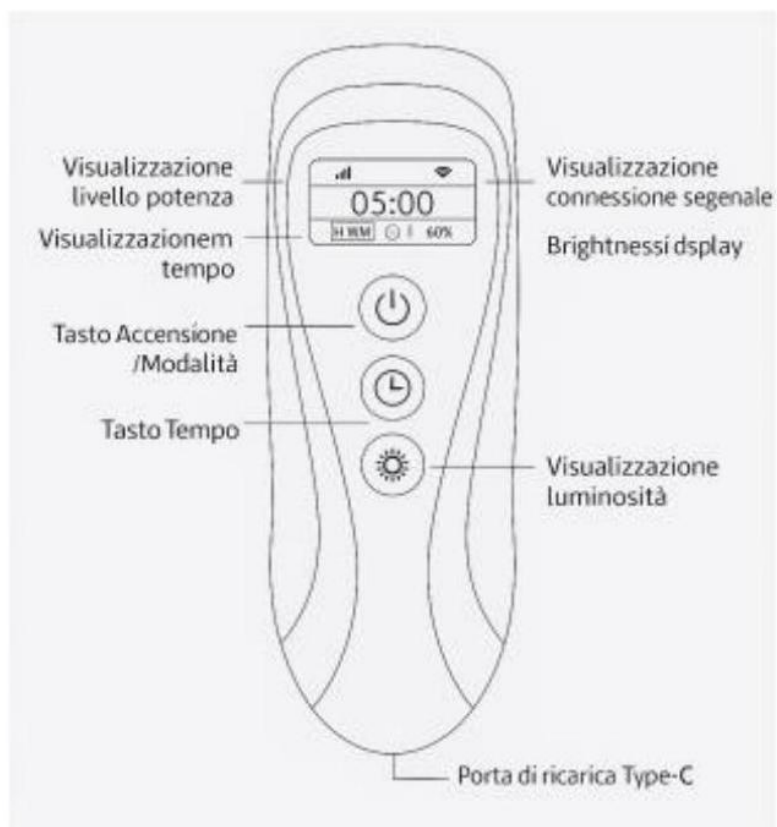
11 SPECIFICHE TECNICHE

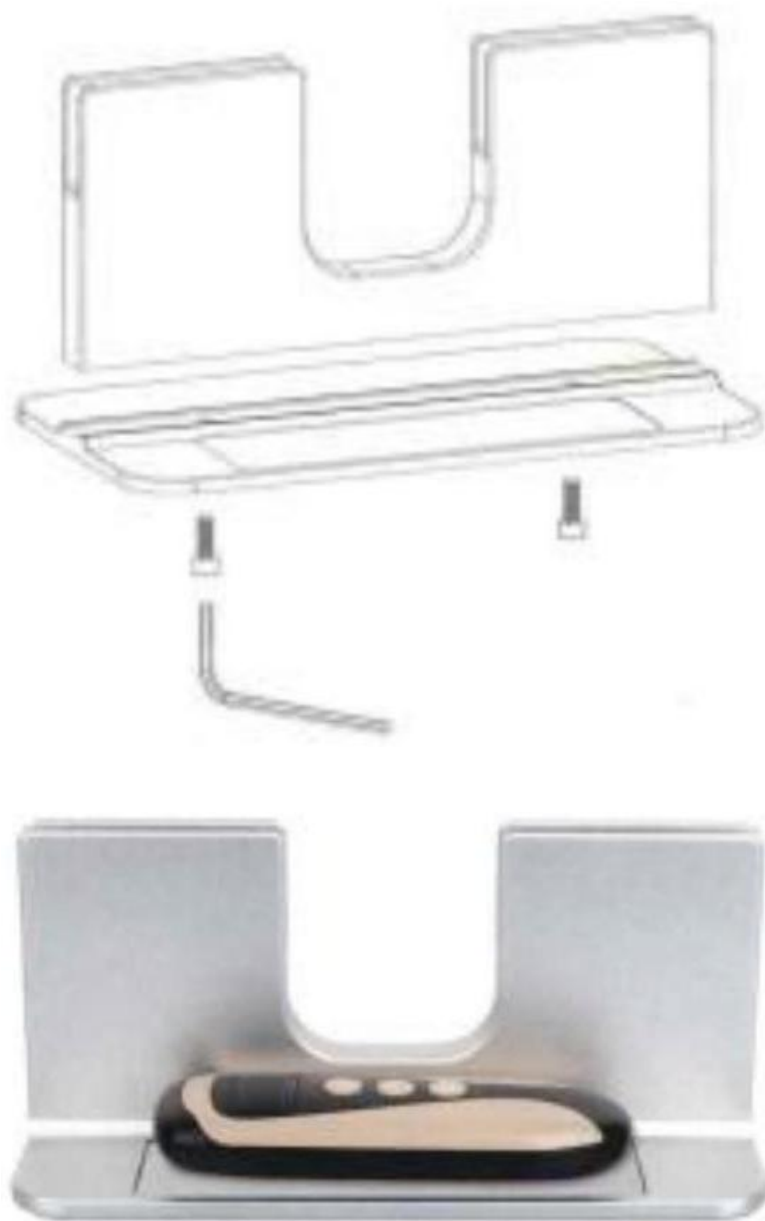
- Modello: G240
- Potenza nominale: 40 W
- Numero di LED: 960
- Modalità LED: 5050
- Rapporto LED: 415:590:630:850 = 1:1:1:1
- Dimensioni: $680 \times 257 \times 8,5$ mm
- Peso: 1.300 g (compreso il controller)
- Regolazione: 4 modalità, 3 livelli di luminosità, timer.
- Regolatore del tempo di ricarica: 2,5 minerali

12 DESCRIZIONE DEI PULSANTI DEL CONTROLLER

- Mostra il livello di potenza
- Orario dello spettacolo
- Modalità di visualizzazione
- Visualizzazione del segnale di connessione
- Luminosità dello schermo
- Pulsante di accensione/modalità

- Timer del sapore
- Pulsante luminosità
- Porta di ricarica di tipo C





13 CONSENSO INFORMATO - Trattamento estetico "BEAUTY BRIDGE+"

13.1 DATI CLIENTE

Nome e Cognome: _____

Data di nascita: _____

Telefono: _____

13.2 DATI OPERATORE / CENTRO

Nome centro: _____

Operatore: _____

13.3 DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO

Il trattamento Beauty Bridge+ utilizza una tecnologia combinata a infrarossi e cromoterapia applicata tramite ponte facciale, finalizzata a stimolare la microcircolazione, migliorare la tonicità cutanea e favorire il benessere della pelle.

13.4 POSSIBILI EFFETTI

Lieve arrossamento temporaneo, sensazione di calore, lieve sensibilità cutanea.

13.5 CONTROINDICAZIONI

Gravidanza, patologie cutanee attive, fotosensibilità, problemi circolatori importanti, patologie oncologiche in corso, infezioni o infiammazioni nella zona trattata.

13.6 DICHIARAZIONI DEL CLIENTE

Dichiaro di aver ricevuto spiegazioni chiare, di essere a conoscenza che si tratta di trattamento estetico e non medico, e di autorizzare l'esecuzione del trattamento.

13.7 PRIVACY

I dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Firma Cliente: _____

Firma Operatore: _____

Data: _____ / _____ / _____

14 INFORMATIVA PRIVACY

(ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679)

La presente informativa è resa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e riguarda il trattamento dei dati personali dei clienti che si sottopongono a trattamenti e tecnologie estetiche.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è:

- Denominazione centro estetico: _____
- Sede legale: _____
- P. IVA / C.F.: _____
- Contatti (telefono/email): _____

Tipologia di dati trattati

Il Titolare può raccogliere e trattare le seguenti categorie di dati:

- Dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita)
- Dati di contatto (telefono, e-mail)
- Dati fiscali per eventuale fatturazione
- Dati particolari relativi allo stato di salute (allergie, patologie, gravidanza, terapie in corso) necessari per valutare l'idoneità ai trattamenti estetici
- Eventuali immagini fotografiche prima/dopo trattamento (previo consenso specifico)

Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

1. Esecuzione di trattamenti estetici e utilizzo di tecnologie professionali (laser, radiofrequenza, ultrasuoni, pressoterapia, ecc.)
2. Valutazione dell'idoneità al trattamento
3. Adempimenti amministrativi, contabili e fiscali
4. Gestione degli appuntamenti
5. Eventuale invio di comunicazioni promozionali (solo previo consenso separato)
6. Eventuale utilizzo di immagini per finalità informative o promozionali (solo previo consenso separato)

Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati si fonda su:

- Esecuzione del contratto/prestazione richiesta
- Adempimento di obblighi di legge
- Consenso esplicito dell'interessato per il trattamento di dati particolari (sanitari)
- Consenso separato per marketing e utilizzo immagini

Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti cartacei e/o informatici, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza.

Sono adottate adeguate misure di sicurezza per prevenire accessi non autorizzati, perdita o diffusione dei dati.

Conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati:

- Per il tempo necessario all'erogazione del servizio
- Per il periodo previsto dalla normativa fiscale e civilistica
- Fino a revoca del consenso per finalità di marketing o utilizzo immagini

Comunicazione dei dati

I dati potranno essere comunicati a:

- Consulenti fiscali e amministrativi
- Software gestionali utilizzati per la gestione clienti
- Autorità competenti, ove previsto dalla legge

I dati non saranno diffusi senza consenso.

Diritti dell'interessato

L'interessato può esercitare in qualsiasi momento i seguenti diritti:

- Accesso ai propri dati
- Rettifica o aggiornamento
- Cancellazione (diritto all'oblio)
- Limitazione del trattamento
- Opposizione al trattamento
- Revoca del consenso
- Reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali

Le richieste possono essere inviate ai recapiti del Titolare sopra indicati.

Natura del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è necessario per l'erogazione dei trattamenti estetici. Il mancato conferimento può comportare l'impossibilità di eseguire il servizio.

CONSENSO

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto e compreso la presente informativa.

Data: _____

Firma: _____

- ☐ Acconsento al trattamento dei dati particolari (sanitari)
- ☐ Acconsento all'utilizzo delle immagini per finalità promozionali
- ☐ Acconsento a ricevere comunicazioni promozionali



Numero di serie

Nome del prodotto:

Tipi di prodotto:

La verifica è stata effettuata nell'ambito seguente:

Informazioni sulla Dichiarazione di Conformità:

Risultato: **Legislazione: Standard:**

✓Direttiva LVD [2014/35/UE] EN 60335-

1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021

EN IEC 60335-2-115:2023+A11:2023

EN 62233:2008

✓Compatibilità elettromagnetica (EMC) [2014/30/UE] EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN IEC 55014-2:2021

Il processo di valutazione è stato svolto in conformità alle regole e alle condizioni individuali concordate con il richiedente.

Data di emissione: 20.12.2024

Data di emissione: 20.12.2029

Madrid 23.12.24

