



COPERTA SAUNA A
INFRAROSSI
Manuale d'uso



Indice

1	MANUALE DI ISTRUZIONI	3
2	SIMBOLI	3
3	AVVERTENZE DI SICUREZZA	8
4	TEMPO DI PRERISCALDAMENTO	9
5	CENTRALINA TOUCHSCREEN	9
6	SPECIFICHE TECNICHE	10
7	CONSENSO INFORMATO PER TRATTAMENTO CON SAU- NA A INFRAROSSI	11
8	INFORMATIVA PRIVACY	13

1 MANUALE DI ISTRUZIONI

Questo è il manuale originale.

Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.

L'aspetto del prodotto può differire leggermente in base al modello ricevuto.

L'azienda non informerà l'utente in caso di aggiornamenti tecnologici o software del prodotto.

2 SIMBOLI

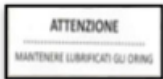
Simboli di indicazioni di pericolo, avvertenze e precauzioni generali che possono apparire su tutte le tipologie di apparecchiature esse sono di puro carattere informativo.

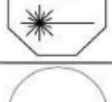
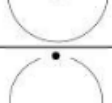
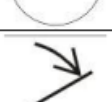
A titolo informativo in questo manuale sono presenti le indicazioni (simboli e/o segni) che evidenziano il grado di pericolo o avvertenze, che sono apportate sulle nostre apparecchiature e sull' etichetta matricola. **Sostituire con nuove etichette quando sono macchiate, poco leggibili o rimosse.**

Contattate il nostro ufficio vendite quando sono necessarie nuove etichette, che vi verranno inviate.

Simboli, segni e / o avvertenze che richiamano l'attenzione degli utenti. Alcuni dei simboli possono apparire sull'apparecchiatura anche se non direttamente attinenti.

	Indica il pericolo per i pazienti, clienti, operatori o il personale
	Indica un potenziale pericolo per i pazienti, clienti, operatori o il personale.
	Poca cautela può causare lesioni alle persone o danni all'apparecchiatura
	Attenzione Emissione laser classe 4
	Evitare esposizione diretta degli occhi alle Emissioni laser
	Attenzione: uso di acqua deionizzata classe D
	Attenzione: per mantenere la garanzia

	Attenzione leggere attentamente il manuale prima dell'utilizzo
	Indicazione di sostituzione filtri
	Attenzione Emittitore
	È obbligatorio proteggere gli occhi con gli appositi occhiali.
	Leggere attentamente il manuale d'uso
	Mantenere lubrificati gli Oring
	Controllo qualità apparecchiatura
	Utilizzare SOLO acqua deionizzata classe D ad uso elettronico
	Assicurati di seguire le istruzioni quando si utilizza la macchina
	Apparecchiatura sotto tensione; utilizzare cautela ed assicurarsi di aver preso tutte le precauzioni del caso, se si utilizza le apparecchiature in luoghi o in modi scorretti si possono prendere scosse elettriche
	Controllo corrente *

	Indica la possibilità di esposizione a radiazioni laser pericolose che possono provocare lesioni all'operatore, paziente, cliente o personale.
	Non utilizzare prodotti infiammabili nei pressi dell'apparecchiatura
	Questo simbolo indica esposizione ad onde elettromagnetiche
	Questo simbolo indica un'attenzione
	Simbolo di messa a Terra
	Indossare occhiali di protezione
	Togliere la spina dalla presa di corrente
	Leggere attentamente il manuale d' istruzioni
	Emergenza, simbolo di Stop Apparecchiatura
	Simbolo interruttore a chiave ON
	Simbolo interruttore a chiave OFF
	Simbolo Pedale di azionamento

	Simbolo di blocco a distanza
	Marchio che certifica la conformità dell'apparecchio agli obblighi legislativi delle direttive comunitarie europee ad essa applicabili
	Il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto urbano ma deve essere oggetto di una raccolta separata AE
	Il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto urbano ma deve essere oggetto di una raccolta separata Pile e Accumulatori
	Non pulire mai l'apparecchiatura né le sue parti con acqua corrente.
	Apparato con parte elettrica applicata di tipo B conforme a IEC EN 60601-1 (1991)
	Questo simbolo indica divieto.
	Spegnere il cellulare durante il trattamento
	Isolamento Elettrico
	Produttore
	Data fabbricazione

	La confezione deve essere gettata nell'indifferenziata.
	Conformità alle regole della raccolta differenziata
	Apparato produttore di OZONO
	Pericolo per persone, animali, ambiente
	Produce gas Tossico
	Dannoso a lungo termine
	Pericolo infiammabile

3 AVVERTENZE DI SICUREZZA

1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. Attendere almeno 30 minuti dopo i pasti prima dell'uso.
3. Usare solo il cavo di alimentazione fornito, alla tensione e frequenza indicate. Non usare cavi non originali.
4. Non lasciare mai il dispositivo incustodito quando è collegato o in funzione. Dopo l'uso scollegarlo e lasciarlo raffreddare prima di pulizia, stoccaggio o spostamento.
5. Spegnerlo e scollegare dalla rete quando non viene utilizzato per lunghi periodi.
6. Non usare in ambienti umidi. Non bagnare la centralina o i cavi. Non immergere in acqua. Se la centralina si bagna o emette odore, scollegare immediatamente.
7. Non piegare la coperta e non appoggiare oggetti pesanti mentre è in funzione.

8. Non posizionare la centralina sulla coperta in funzione per evitare surriscaldamenti o fusione dei componenti.
9. Non usare vicino a fornelli elettrici o fonti di calore elevate.
10. Usare solo su superfici resistenti al calore.
11. Non usare su letti ad acqua, lattice, plastica, memory foam, reti regolabili, letti a castello, lettini per bambini o materiali sintetici o infiammabili.
12. Non avvolgere i cavi strettamente intorno al tappetino o alla centralina.
13. Conservare in luogo asciutto e lontano dalla luce solare diretta.
14. Pulire con un panno morbido dopo ogni utilizzo.
15. Evitare il contatto con oggetti taglienti o duri.
16. Non usare o conservare all'aperto.
17. Non usare durante temporali o fulmini.
18. Se il dispositivo emette rumori anomali, spegnere e scollegare immediatamente.

4 TEMPO DI PRERISCALDAMENTO

Si consiglia di entrare nella coperta 3 – 5 minuti dopo l'accensione.

Il riscaldamento completo richiede circa 15 minuti (soprattutto in inverno o nei paesi a 110 V).

5 CENTRALINA TOUCHSCREEN



1. Collegare
2. Premere ENTER
3. Toccare per impostare tempo e temperatura
4. Premere ON
5. A fine ciclo premere HOME sullo schermo e scollegare

6 SPECIFICHE TECNICHE

- Dimensioni: 180×190 cm
- Peso netto: 10,5 kg, Peso Lordo 11,5Kg
- Dimesioni: $52 \times 23 \times 46$ cm
- Alimentazione:
 - 110 V – 450 W; 60 Hz
 - 220 V – 560 W; 50 Hz

7 CONSENSO INFORMATO PER TRATTAMENTO CON SAUNA A INFRAROSSI

Il/La sottoscritto/a _____,
nato/a il ____/____/_____, dichiara di essere stato/a informato/a in modo chiaro e comprensibile riguardo al trattamento con sauna a infrarossi.

Descrizione del trattamento

La sauna a infrarossi utilizza radiazioni infrarosse per riscaldare il corpo direttamente, favorendo la sudorazione, il rilassamento muscolare e il benessere generale.

Benefici potenziali

- Rilassamento e riduzione dello stress
- Miglioramento della circolazione sanguigna
- Eliminazione delle tossine attraverso la sudorazione
- Sollievo da tensioni muscolari e dolori articolari

Possibili rischi e controindicazioni

- Disidratazione
- Ipotensione o capogiri
- Ustioni lievi in caso di uso improprio
- Non indicato in caso di:
 - Gravidanza
 - Patologie cardiovascolari gravi
 - Presenza di pacemaker o dispositivi elettronici impiantati
 - Febbre o infezioni in corso
 - Patologie cutanee attive
 - Assunzione di farmaci che alterano la termoregolazione

Dichiarazioni del cliente

- Dichiaro di aver informato l'operatore del mio stato di salute e di eventuali patologie.
- Dichiaro di non trovarmi in condizioni di controindicazione sopra elencate (salvo diversa indicazione medica).
- Mi impegno a comunicare immediatamente qualsiasi sensazione di malessere durante il trattamento.

- Ho avuto la possibilità di fare domande e ho ricevuto risposte soddisfacenti.

Consenso

Con la firma del presente documento, autorizzo volontariamente l'esecuzione del trattamento con sauna a infrarossi.

Luogo e data _____

Firma del cliente _____

Firma dell'operatore _____

8 INFORMATIVA PRIVACY

(ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679)

La presente informativa è resa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e riguarda il trattamento dei dati personali dei clienti che si sottopongono a trattamenti e tecnologie estetiche.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è:

- Denominazione centro estetico: _____
- Sede legale: _____
- P. IVA / C.F.: _____
- Contatti (telefono/email): _____

Tipologia di dati trattati

Il Titolare può raccogliere e trattare le seguenti categorie di dati:

- Dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita)
- Dati di contatto (telefono, e-mail)
- Dati fiscali per eventuale fatturazione
- Dati particolari relativi allo stato di salute (allergie, patologie, gravidanza, terapie in corso) necessari per valutare l'idoneità ai trattamenti estetici
- Eventuali immagini fotografiche prima/dopo trattamento (previo consenso specifico)

Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

1. Esecuzione di trattamenti estetici e utilizzo di tecnologie professionali (laser, radiofrequenza, ultrasuoni, pressoterapia, ecc.)
2. Valutazione dell'idoneità al trattamento
3. Adempimenti amministrativi, contabili e fiscali
4. Gestione degli appuntamenti
5. Eventuale invio di comunicazioni promozionali (solo previo consenso separato)
6. Eventuale utilizzo di immagini per finalità informative o promozionali (solo previo consenso separato)

Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati si fonda su:

- Esecuzione del contratto/prestazione richiesta
- Adempimento di obblighi di legge
- Consenso esplicito dell'interessato per il trattamento di dati particolari (sanitari)
- Consenso separato per marketing e utilizzo immagini

Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti cartacei e/o informatici, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza.

Sono adottate adeguate misure di sicurezza per prevenire accessi non autorizzati, perdita o diffusione dei dati.

Conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati:

- Per il tempo necessario all'erogazione del servizio
- Per il periodo previsto dalla normativa fiscale e civilistica
- Fino a revoca del consenso per finalità di marketing o utilizzo immagini

Comunicazione dei dati

I dati potranno essere comunicati a:

- Consulenti fiscali e amministrativi
- Software gestionali utilizzati per la gestione clienti
- Autorità competenti, ove previsto dalla legge

I dati non saranno diffusi senza consenso.

Diritti dell'interessato

L'interessato può esercitare in qualsiasi momento i seguenti diritti:

- Accesso ai propri dati
- Rettifica o aggiornamento
- Cancellazione (diritto all'oblio)
- Limitazione del trattamento
- Opposizione al trattamento

- Revoca del consenso
- Reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali

Le richieste possono essere inviate ai recapiti del Titolare sopra indicati.

Natura del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è necessario per l'erogazione dei trattamenti estetici. Il mancato conferimento può comportare l'impossibilità di eseguire il servizio.

CONSENSO

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto e compreso la presente informativa.

Data: _____

Firma: _____

- ☐ Acconsento al trattamento dei dati particolari (sanitari)
- ☐ Acconsento all'utilizzo delle immagini per finalità promozionali
- ☐ Acconsento a ricevere comunicazioni promozionali



Numero di serie

Nome del prodotto:

Tipi di prodotto:

La verifica è stata effettuata nell'ambito seguente:

Informazioni sulla Dichiarazione di Conformità:

Risultato: **Legislazione: Standard:**

- ✓Direttiva LVD [2014/35/UE] EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021
EN IEC 60335-2-115:2023+A11:2023
EN 62233:2008
- ✓Compatibilità elettromagnetica (EMC) [2014/30/UE] EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 55014-2:2021

Il processo di valutazione è stato svolto in conformità alle regole e alle condizioni individuali concordate con il richiedente.

Data di emissione: 20.12.2024

Data di emissione: 20.12.2029

Madrid 23.12.24

