



# ROLLERSHAPE+

## Manuale d'uso



Leggere attentamente il manuale di istruzioni e seguire le istruzioni prima dell'uso.

## Indice

|           |                                                                  |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Prefazione</b>                                                | <b>4</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Simboli</b>                                                   | <b>4</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Introduzione dei principi</b>                                 | <b>9</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Caratteristiche</b>                                           | <b>13</b> |
| <b>5</b>  | <b>Parte dell'applicazione</b>                                   | <b>13</b> |
| <b>6</b>  | <b>Istruzioni per lo strumento</b>                               | <b>14</b> |
| <b>7</b>  | <b>Introduzione all'interfaccia</b>                              | <b>17</b> |
| 7.1       | Pannello di controllo (interfaccia utente) . . . . .             | 17        |
| <b>8</b>  | <b>Cos'è una macchina a rulli a sfere interne?</b>               | <b>18</b> |
| <b>9</b>  | <b>La terapia microvibrazionale compressiva è sicura?</b>        | <b>19</b> |
| <b>10</b> | <b>Quanto dura un singolo trattamento?</b>                       | <b>19</b> |
| <b>11</b> | <b>Sentirai dolore durante il trattamento?</b>                   | <b>19</b> |
| <b>12</b> | <b>Con quale frequenza può essere eseguito il trattamento?</b>   | <b>19</b> |
| <b>13</b> | <b>Parametri del prodotto</b>                                    | <b>20</b> |
| <b>14</b> | <b>CONSENSO INFORMATO - Trattamento estetico "ROLLER-SHAPE+"</b> | <b>21</b> |
| 14.1      | DATI CLIENTE . . . . .                                           | 21        |
| 14.2      | DATI OPERATORE / CENTRO . . . . .                                | 21        |
| 14.3      | DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO . . . . .                            | 21        |
| 14.4      | POSSIBILI EFFETTI . . . . .                                      | 21        |
| 14.5      | CONTROINDICAZIONI . . . . .                                      | 21        |
| 14.6      | DICHIARAZIONI DEL CLIENTE . . . . .                              | 21        |
| 14.7      | PRIVACY . . . . .                                                | 21        |
| <b>15</b> | <b>INFORMATIVA PRIVACY</b>                                       | <b>22</b> |

# 1 Prefazione

Gentile utente:

Vi invitiamo a scegliere il prodotto più recente della nostra azienda, la macchina di rulli a sfere interni, che utilizzano un'innovativa tecnologia di microvibrazione compressione. Questa tecnologia è ottenuta attraverso una maniglia cilindrica intelligente che Ruota di 360°. Per la rotazione si utilizza un rullo con 50 sfere in silicone sul manico più grande. Cura del corpo; un altro rullo con 60 palline di silicone su un manico più piccolo Viene utilizzato per la cura del viso e del collo. Le sfere di silicone vengono inserite in forma a nido d'ape con densità e diametro specifici. La direzione di rotazione e la pressione assicura che la microcompressione venga trasmessa al tessuto. L'impugnatura unica Produce una compressione meccanica e microvibrazioni sulla pelle, che non possono essere replicate. con le mani o con altre tecniche. La "terapia microvibrazionale compressiva" sostituisce... il metodo tradizionale di "aspirazione massaggio di trazione", utilizzando la microcompressione invece della suzione e la microvibrazione invece di trazione. Applicato al corpo, aiuta a migliorare il drenaggio linfatico e circolazione e miglioramento della circolazione profonda. Disintossicazione. sollievo muscolare rigidità e Dolore, scomporre i depositi di grasso sottocutaneo,

Elimina la cellulite, riduce la cellulite e modella la tua figura. Già dopo pochi utilizzi. Con questi trattamenti il tuo corpo ridurrà immediatamente il suo volume di 1 o 2 taglie! Applicato Sul viso, aiuta a migliorare la formazione dei vasi sanguigni, favorendo così produzione di collagene ed elastina, aumentando l'apporto di ossigeno, nutrendo e Illumina i tessuti dall'interno. Rilassa e regola i muscoli e aiuta per ridurre le linee di espressione.

Migliora l'aspetto, riduce il gonfiore, combatte il rilassamento cutaneo e ringiovanisce la pelle. affrontare in modo significativo. La terapia microvibrazionale compressiva è appositamente progettato per il ringiovanimento cutaneo non invasivo, il Rimodellamento corporeo e fisioterapia. È l'ultima generazione in fatto di cura Rimodellamento del corpo per viso, collo, spalle, braccia, petto, schiena, vita, addome, glutei, gambe e piedi, tra gli altri. Terapia microvibrazionale di La compressione è un trattamento che può riattivare la circolazione sanguigna e un metodo che può trattare patologie complesse come la stasi linfatica, linfedema e cellulite, migliorando così la nutrizione e l'ossigenazione della pelle Cellulare. La terapia microvibrazionale compressiva è un'innovativa combinazione di bellezza e salute.

# 2 Simboli

*Simboli di indicazioni di pericolo, avvertenze e precauzioni generali che possono apparire su tutte le tipologie di apparecchiature esse sono di puro carattere informativo.*


A titolo informativo in questo manuale sono presenti le indicazioni (simboli e/o segni) che evidenziano il grado di pericolo o avvertenze, che sono apportate sulle nostre apparecchiature e sull'etichetta matricola. **Sostituire con nuove etichette quando sono macchiate, poco leggibili o rimosse.**




Contattate il nostro ufficio vendite quando sono necessarie nuove etichette, che vi verranno inviate.

Simboli, segni e / o avvertenze che richiamano l'attenzione degli utenti. Alcuni

dei simboli possono apparire sull'apparecchiatura anche se non direttamente attinenti.

|                                                                                     |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | Indica il pericolo per i pazienti, clienti, operatori o il personale             |
|    | Indica un potenziale pericolo per i pazienti, clienti, operatori o il personale. |
|    | Poca cautela può causare lesioni alle persone o danni all'apparecchiatura        |
|    | Attenzione Emissione laser classe 4                                              |
|    | Evitare esposizione diretta degli occhi alle Emissioni laser                     |
|  | Attenzione: uso di acqua deionizzata classe D                                    |
|  | Attenzione: per mantenere la garanzia                                            |
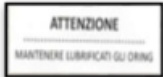
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Attenzione leggere attentamente il manuale prima dell'utilizzo                                                                                                                                                       |
|    | Indicazione di sostituzione filtri                                                                                                                                                                                   |
|    | Attenzione Emittitore                                                                                                                                                                                                |
|    | È obbligatorio proteggere gli occhi con gli appositi occhiali.                                                                                                                                                       |
|    | Leggere attentamente il manuale d'uso                                                                                                                                                                                |
|   | Mantenere lubrificati gli Oring                                                                                                                                                                                      |
|  | Controllo qualità apparecchiatura                                                                                                                                                                                    |
|  | Utilizzare SOLO acqua deionizzata classe D ad uso elettronico                                                                                                                                                        |
|  | Assicurati di seguire le istruzioni quando si utilizza la macchina                                                                                                                                                   |
|  | Apparecchiatura sotto tensione; utilizzare cautela ed assicurarsi di aver preso tutte le precauzioni del caso, se si utilizza le apparecchiature in luoghi o in modi scorretti si possono prendere scosse elettriche |
|  | Controllo corrente *                                                                                                                                                                                                 |
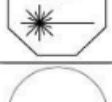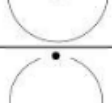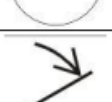
|                                                                                     |                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Indica la possibilità di esposizione a radiazioni laser pericolose che possono provocare lesioni all'operatore, paziente, cliente o personale. |
|    | Non utilizzare prodotti infiammabili nei pressi dell'apparecchiatura                                                                           |
|    | Questo simbolo indica esposizione ad onde elettromagnetiche                                                                                    |
|    | Questo simbolo indica un'attenzione                                                                                                            |
|    | Simbolo di messa a Terra                                                                                                                       |
|   | Indossare occhiali di protezione                                                                                                               |
|  | Togliere la spina dalla presa di corrente                                                                                                      |
|  | Leggere attentamente il manuale d' istruzioni                                                                                                  |
|  | Emergenza, simbolo di Stop Apparecchiatura                                                                                                     |
|  | Simbolo interruttore a chiave ON                                                                                                               |
|  | Simbolo interruttore a chiave OFF                                                                                                              |
|  | Simbolo Pedale di azionamento                                                                                                                  |

|                                                                                     |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Simbolo di blocco a distanza                                                                                                           |
|    | Marchio che certifica la conformità dell'apparecchio agli obblighi legislativi delle direttive comunitarie europee ad essa applicabili |
|    | Il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto urbano ma deve essere oggetto di una raccolta separata AE                            |
|    | Il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto urbano ma deve essere oggetto di una raccolta separata Pile e Accumulatori           |
|  | Non pulire mai l'apparecchiatura né le sue parti con acqua corrente.                                                                   |
|  | Apparato con parte elettrica applicata di tipo B conforme a IEC EN 60601-1 (1991)                                                      |
|  | Questo simbolo indica divieto.                                                                                                         |
|  | Spegnere il cellulare durante il trattamento                                                                                           |
|  | Isolamento Elettrico                                                                                                                   |
|  | Produttore                                                                                                                             |
|  | Data fabbricazione                                                                                                                     |




|                                                                                     |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|    | La confezione deve essere gettata nell'indifferenziata. |
|    | Conformità alle regole della raccolta differenziata     |
|    | Apparato produttore di OZONO                            |
|    | Pericolo per persone, animali, ambiente                 |
|    | Produce gas Tossico                                     |
|   | Dannoso a lungo termine                                 |
|  | Pericolo infiammabile                                   |

### 3 Introduzione dei principi

Il dispositivo a rulli interni è un trattamento non invasivo di Microvibrazione tramite compressione meccanica. Il principio è che la sfera in silicone Ruota di 360° lungo il rullo per generare microvibrazioni di compressione. Ruotando e applicando pressione sulla pelle si produce un effetto di "compressione". pulsante", con un movimento alternato, continuo di impastamento e spinta trazione. Il tessuto subisce pressione e sollevamento, senza comprimere o danneggiare il pelle. La pressione esercitata sul tessuto allunga le cellule e le stimola. attività cellulare naturale e profonda, flusso sanguigno e ossigenazione. I depositi di grasso vengono pressurizzati e allentati per la decomposizione, riduce ed elimina la cellulite. Inoltre, esercita pressione sui gruppi muscolari. muscoli profondi per ammorbidirli e allungarli completamente, riducendo riducendo così la rigidità e il dolore muscolare e accelerando il metabolismo.


Elimina la stagnazione e l'accumulo di liquidi, condiziona i tessuti e Rassoda la pelle, rimodellando il corpo. Stimola anche i fibroblasti. Aumenta la produzione di collagene ed elastina, aumenta il flusso sanguigno e L'ossigeno aumenta. Di conseguenza, le rughe vengono levigate e il Riduce il gonfiore e le borse sotto gli occhi e la pelle risulta ringiovanita e rassodata. Questa tecnologia è clinicamente

provata per tonificare i muscoli e scolpire il corpo e il viso per ringiovanire, oltre ad aiutare a ridisegnare e rassodare il seno.

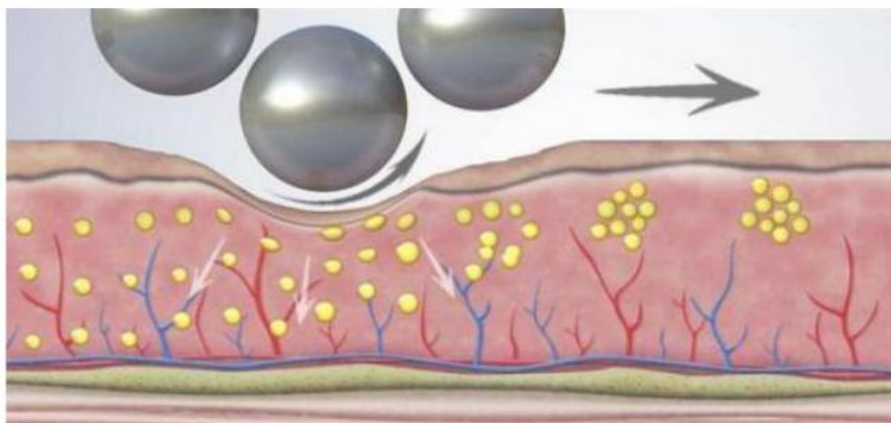



Rimodellamento dell'azione

Rimodella i contorni e leviga le rughe.

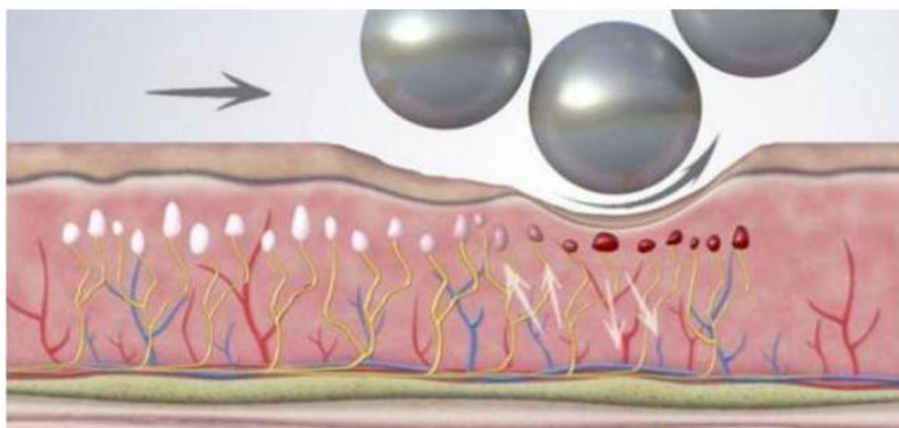


Sedazione

Migliora l'ossigenazione ed elimina il dolore.

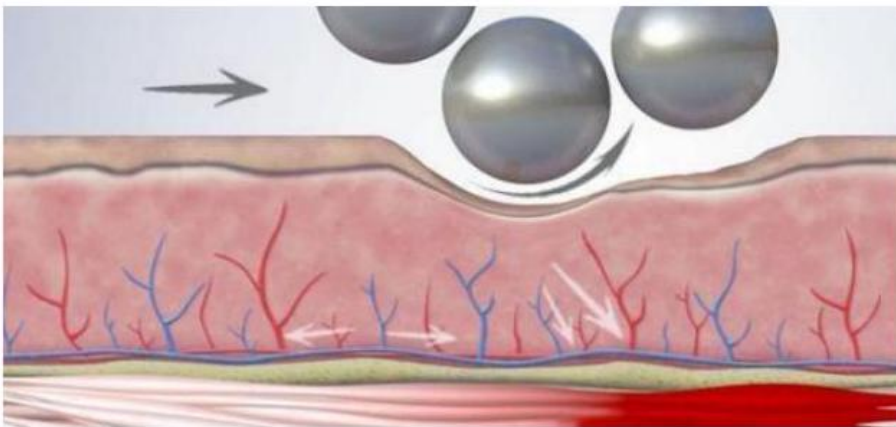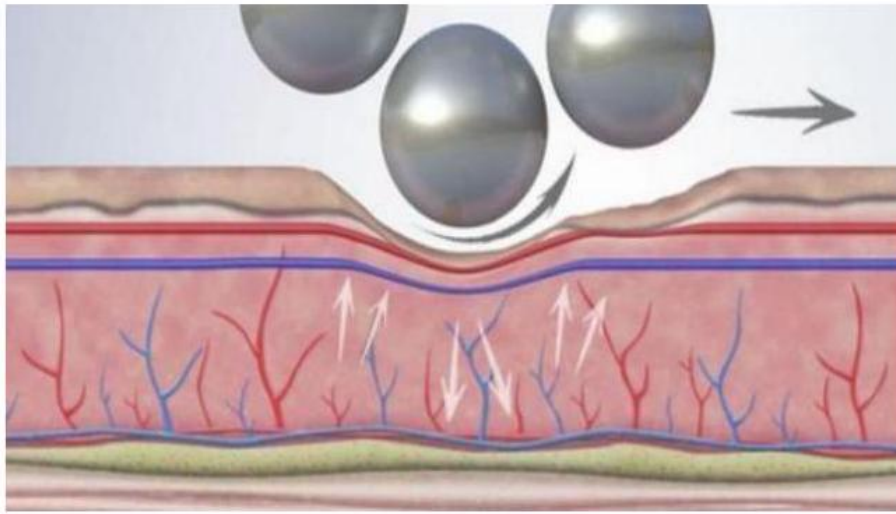

Azione muscolare

Tonifica i muscoli e rassoda i tessuti.

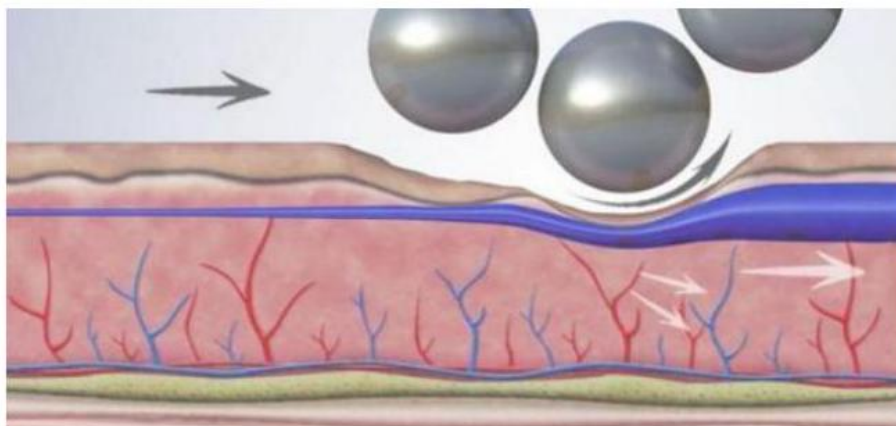

Azione di drenaggio

Elimina le tossine e favorisce il drenaggio linfatico.

Effetto vascolare

Migliora la circolazione sanguigna e nutre i tessuti.

## 4 Caratteristiche

1. C'è una maniglia grande e una maniglia piccola.
2. Le sfere del manubrio sono sostituibili. Tutte le maniglie includono un set di sfere metalliche e un altro di Silicone. (Nota: non sono sostituibili sul mercato.)
3. 10 velocità regolabili e ogni maniglia ha una luce:
  - luce rossa
  - luce blu
  - luce verde
4. Ci sono tre modalità di illuminazione opzionali per ogni colore, Tutte le ruote della maniglia consentono il movimento bidirezionale e può memorizzare 5 set di parametri operazioni.
5. Custodia stampata a iniezione, touchscreen da 5,6" pollici, flight case e imballaggio di alta qualità.

## 5 Parte dell'applicazione




## 6 Istruzioni per lo strumento

- Installazione: allineare la maniglia con l'apposita presa sul retro del dispositivo e posizionarlo sullo scaffale; inserire il cavo di alimentazione nella presa sul retro del dispositivo, accendere il dispositivo e accendere l'interruttore di alimentazione, quindi premere il pulsante di accensione per avviare il dispositivo.
- Manico piccolo: da utilizzare su viso, collo e spalle.




- Manico grande: da utilizzare sul corpo.

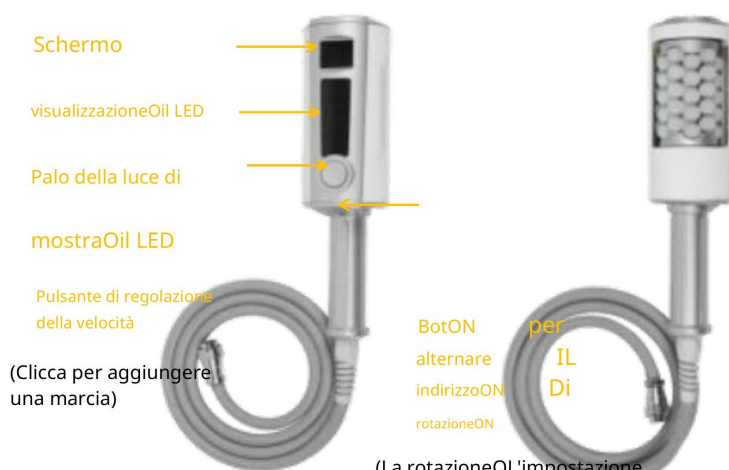


(La rotazioneOL'impostazione predefinita è avanti. Premere una volta per passare alla rotazione.Oinvertire e premere di nuovo per passare alla rotazioneOn in avanti).




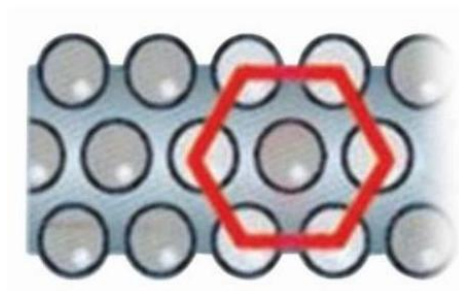

Fornitura di sfere a forma di nido d'ape

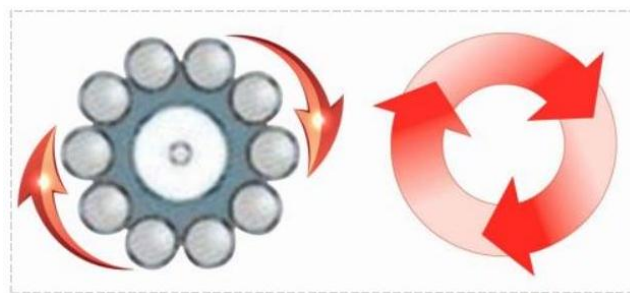

Rotazione in senso orario  
(Abbreviazione: rotazione)

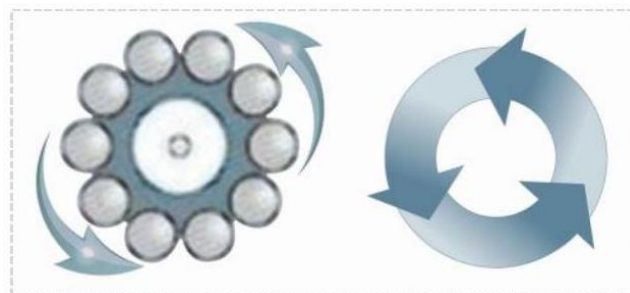

Rotazione in senso antiorario  
(Abbreviazione: inverso)

- La sostituzione e l'installazione del rullo integrato nella maniglia sono illustrate nella figura seguente:



1. Premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti su entrambi i lati.



2. Rimuovere il corpo del rullo a sfera in silicone



3. Sostituire e installare un nuovo




4. Allinea il corpo dell'asse y.  
Installare il coperchio nello slot.



## 7 Introduzione all'interfaccia

A. Verificare che il collegamento dello strumento sia corretto. Collegare lo strumento all'alimentazione e accenderlo. Premere il pulsante di accensione e il dispositivo si accenderà immediatamente. Apparirà l'interfaccia di avvio.

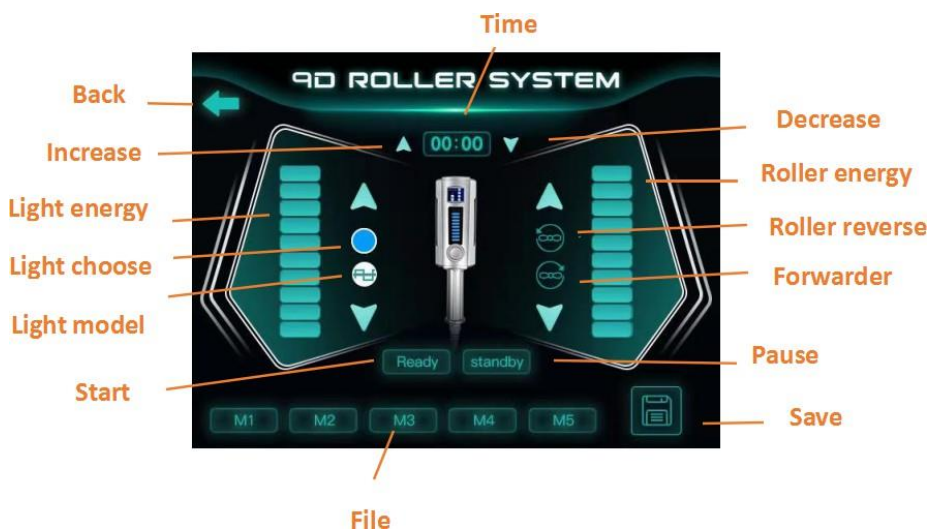

IO

### 7.1 Pannello di controllo (interfaccia utente)

Manico grande



Manico piccolo



Direzione rotazione:

Senso orario



|                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Senso antiorario                        |    |
| <b>Tempo di funzionamento</b>           | 60 minuti, marce 1–10 (intervallo 5 min)                                            |
| <b>Velocità (1–10)</b>                  |    |
| Diminuisci                              |    |
| Aumenta                                 |    |
| <b>Comandi esecuzione:</b>              |                                                                                     |
| Start                                   |    |
| Pausa                                   |   |
| <b>Memorizzazione parametri (M1–M5)</b> |  |
| <b>Pulsante ritorno</b>                 |  |
| <b>Luce</b>                             |  |
| <b>Modalità</b>                         |  |

Tabella 1: Pannello di controllo

## 8 Cos'è una macchina a rulli a sfere interne?

Il rullo a sfere interno è uno strumento all'avanguardia per il body shaping, riconosciuto a livello mondiale. Utilizza l'innovativa microvibrazione a compressione per migliorare drenaggio linfatico, aumento della circolazione sanguigna, miglioramento della cellulite, riduzione della cellulite, inversione della cellulite. Combatte i segni dell'invecchiamento, condiziona i muscoli e disintossica. Può essere utilizzato su Viso e corpo. Le zone più richieste per il trattamento sono cosce, glutei e... parte superiore delle braccia.

## **9 La terapia microvibrazionale compressiva è sicura?**

La terapia compressiva microvibrazionale è un trattamento non invasivo e sicuro al 100%. e non ha effetti collaterali.

## **10 Quanto dura un singolo trattamento?**

È adatto a qualsiasi parte del corpo o del viso, ma a seconda delle dimensioni del Il tempo di trattamento per la zona varierà da un minimo di circa 45 minuti ad un massimo di 1 ora e 30 minuti.

## **11 Sentirai dolore durante il trattamento?**

No, è un trattamento molto piacevole. La maggior parte dei clienti afferma di sentirsi Simile a un massaggio dei tessuti profondi. L'intensità/livello di stress aumenta gradualmente. ad ogni seduta e può essere regolato in base alla tolleranza desiderata. Non ha effetti collaterali. effetti collaterali e può tornare alla vita normale subito dopo il trattamento.

## **12 Con quale frequenza può essere eseguito il trattamento?**

In genere si consiglia di farlo due o tre volte a settimana. Tuttavia, il tempo Il tempo minimo tra una sessione e l'altra è di 48 ore.

## 13 Parametri del prodotto

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto               | Macchina a rulli a sfere interne                          |
| Schermo tattile                 | Ampio schermo LCD da 5,6 pollici                          |
| Grande velocità della maniglia  | 450 giri al minuto                                        |
| Piccola velocità della maniglia | 410 giri al minuto                                        |
| Frequenza di uscita             | 40 – 254 Hz                                               |
| Tensione di ingresso            | CA 110 V/220 V                                            |
| Potenza di uscita               | 100 – 1000 W                                              |
| Fusibile                        | 5A                                                        |
| manico grande                   | 50 palline in silicone (per la cura del corpo)            |
| manico piccolo                  | 60 palline in silicone (per la cura del viso e del collo) |
| Temperatura ambiente            | 5°C ~ +40°C                                               |

## **14 CONSENSO INFORMATO - Trattamento estetico "ROLLERSHAPE+"**

### **14.1 DATI CLIENTE**

Nome e Cognome: \_\_\_\_\_

Data di nascita: \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_

### **14.2 DATI OPERATORE / CENTRO**

Nome centro: \_\_\_\_\_

Operatore: \_\_\_\_\_

### **14.3 DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO**

Il trattamento RollerShape+ utilizza una tecnologia a rulli compressivi per stimolare il microcircolo, favorire il drenaggio dei liquidi, migliorare la tonicità dei tessuti e contrastare gli inestetismi della cellulite.

### **14.4 POSSIBILI EFFETTI**

Lieve arrossamento temporaneo, sensazione di pressione o calore, lieve sensibilità nella zona trattata.

### **14.5 CONTROINDICAZIONI**

Gravidanza, fragilità capillare importante, problemi circolatori severi, patologie oncologiche in corso, infezioni o infiammazioni nella zona trattata, presenza di ematomi o lesioni cutanee.

### **14.6 DICHIARAZIONI DEL CLIENTE**

Dichiaro di aver ricevuto spiegazioni chiare, di essere a conoscenza che si tratta di trattamento estetico e non medico, e di autorizzare l'esecuzione del trattamento.

### **14.7 PRIVACY**

I dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Firma Cliente: \_\_\_\_\_

Firma Operatore: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

## 15 INFORMATIVA PRIVACY

(ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679)

La presente informativa è resa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e riguarda il trattamento dei dati personali dei clienti che si sottopongono a trattamenti e tecnologie estetiche.

### Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è:

- Denominazione centro estetico: \_\_\_\_\_
- Sede legale: \_\_\_\_\_
- P. IVA / C.F.: \_\_\_\_\_
- Contatti (telefono/email): \_\_\_\_\_

### Tipologia di dati trattati

Il Titolare può raccogliere e trattare le seguenti categorie di dati:

- Dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita)
- Dati di contatto (telefono, e-mail)
- Dati fiscali per eventuale fatturazione
- Dati particolari relativi allo stato di salute (allergie, patologie, gravidanza, terapie in corso) necessari per valutare l'idoneità ai trattamenti estetici
- Eventuali immagini fotografiche prima/dopo trattamento (previo consenso specifico)

### Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

1. Esecuzione di trattamenti estetici e utilizzo di tecnologie professionali (laser, radiofrequenza, ultrasuoni, pressoterapia, ecc.)
2. Valutazione dell'idoneità al trattamento
3. Adempimenti amministrativi, contabili e fiscali
4. Gestione degli appuntamenti
5. Eventuale invio di comunicazioni promozionali (solo previo consenso separato)
6. Eventuale utilizzo di immagini per finalità informative o promozionali (solo previo consenso separato)

## **Base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei dati si fonda su:

- Esecuzione del contratto/prestazione richiesta
- Adempimento di obblighi di legge
- Consenso esplicito dell'interessato per il trattamento di dati particolari (sanitari)
- Consenso separato per marketing e utilizzo immagini

## **Modalità di trattamento**

Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti cartacei e/o informatici, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza. Sono adottate adeguate misure di sicurezza per prevenire accessi non autorizzati, perdita o diffusione dei dati.

## **Conservazione dei dati**

I dati personali saranno conservati:

- Per il tempo necessario all'erogazione del servizio
- Per il periodo previsto dalla normativa fiscale e civilistica
- Fino a revoca del consenso per finalità di marketing o utilizzo immagini

## **Comunicazione dei dati**

I dati potranno essere comunicati a:

- Consulenti fiscali e amministrativi
- Software gestionali utilizzati per la gestione clienti
- Autorità competenti, ove previsto dalla legge

I dati non saranno diffusi senza consenso.

## **Diritti dell'interessato**

L'interessato può esercitare in qualsiasi momento i seguenti diritti:

- Accesso ai propri dati
- Rettifica o aggiornamento
- Cancellazione (diritto all'oblio)
- Limitazione del trattamento
- Opposizione al trattamento
- Revoca del consenso
- Reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali

Le richieste possono essere inviate ai recapiti del Titolare sopra indicati.

### **Natura del conferimento dei dati**

Il conferimento dei dati è necessario per l'erogazione dei trattamenti estetici. Il mancato conferimento può comportare l'impossibilità di eseguire il servizio.

### **CONSENSO**

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto e compreso la presente informativa.

Data: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

- ☐ Acconsento al trattamento dei dati particolari (sanitari)
- ☐ Acconsento all'utilizzo delle immagini per finalità promozionali
- ☐ Acconsento a ricevere comunicazioni promozionali





**Numero di serie**

**Nome del prodotto:**

**Tipi di prodotto:**

La verifica è stata effettuata nell'ambito seguente:

Informazioni sulla Dichiarazione di Conformità:

Risultato: **Legislazione: Standard:**

✓Direttiva LVD [2014/35/UE] EN 60335-

1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021

EN IEC 60335-2-115:2023+A11:2023

EN 62233:2008

✓Compatibilità elettromagnetica (EMC) [2014/30/UE] EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN IEC 55014-2:2021

Il processo di valutazione è stato svolto in conformità alle regole e alle condizioni individuali concordate con il richiedente.

**Data di emissione:** 20.12.2024

**Data di emissione:** 20.12.2029

Madrid 23.12.24

